

E v o l u t i s

C R E A T E U R F A B R I C A N T



UNIC® Trauma

Humeral stem for fracture
of the proximal humerus

*Tige humérale pour
fracture de l'humérus
proximal*

Evolutis
MOTION INSIDE

UNIC® Trauma stem



Developed on the basis of the UNIC anatomic and reverse shoulder system, the UNIC trauma stem is indicated for the fractures of the proximal humerus. Slightly longer than the standard prosthesis, the UNIC Trauma has hollowed-out anterior and posterior surfaces with a three dimensional macrostructure to enhance the stability of the bony fragments. UNIC trauma is compatible with all the components of the UNIC range: cup, glenoid base and sphere of the reverse version, humeral head and glenoid of the anatomic version, and the CTA head.




Elaborée sur la base des prothèses humérales UNIC anatomique et inversée, la tige UNIC Trauma est adaptée aux indications de fracture de l'humérus proximal. Plus longue que la tige standard, elle présente des faces évidées dont la macrostructure en relief est destinée à favoriser l'accroche des fragments osseux. UNIC Trauma est compatible avec l'ensemble des éléments de la gamme UNIC: cupule, base glénoïdienne et sphère du système inversé, tête humérale et glène du système anatomique, tête CTA.

- Compatibility with all components of the UNIC range*
- Compatibilité avec l'ensemble des composants de la gamme UNIC*



- Medial hook & holes for suture threads and cerclages
- Crochet interne et trous pour sutures et cerclages

- Suture loops: 2 colours to easily differentiate the threads
- Sutures boucles en 2 couleurs pour une différenciation facilitée des brins

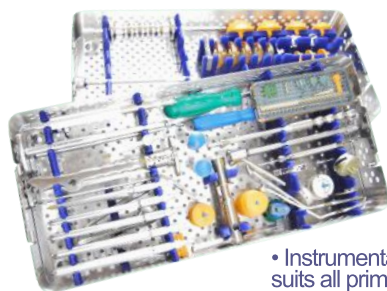

- Instrumentation set (E28 9105 & E28 9106) suits all primary indications
- Instrumentation (E28 9105 et E28 9106) couvre toutes les indications primaires

- Large collar to limit secondary migration
- Colerette large pour limiter la migration secondaire



- "Clover" connection: full compatibility with the UNIC system
- Connexion "trèfle": compatibilité totale au système UNIC

- Hollowed out anterior, posterior, and lateral surfaces: correct positioning of tuberosities
- Evidement A/P et externe: repositionnement des tubérosités

- 3D macrostructure to enhance fragment mechanical stability
- Macrostructure 3D : ancrage mécanique des fragments

- Fluted shiny-polished distal tip can be cemented
- Quille cylindro-conique polie-brillante cimentable



Description	Size	Cat. N°	Désignation	Taille
Humeral Trauma Stem	Size 0	E27 030	Tige Humérale Trauma	Taille 0
Humeral Trauma Stem	Size 1	E27 031	Tige Humérale Trauma	Taille 1
Humeral Trauma Stem	Size 2	E27 032	Tige Humérale Trauma	Taille 2
Humeral Trauma Stem	Size 3	E27 033	Tige Humérale Trauma	Taille 3
Humeral Trauma Stem	Size 4	E27 034	Tige Humérale Trauma	Taille 4
1 loop suture white		292-1001	Suture 1 boucle blanche	
1 loop suture green		292-1003	Suture 1 boucle verte	
Humeral Augment XS		E27 112	Réhausseur huméral XS	

Information Importante :

Les implants UNIC Trauma sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties totales anatomiques (PTEA) ou totales inversées (PTEI) ou hémiprothèse (CTA) sur indications de fracture de l'épiphyse proximale de l'humérus.

Les implants UNIC Trauma sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions. Consultez les modalités sur le site www.ameli.fr. Le chirurgien est invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation incluse dans le conditionnement du DMI, ainsi que le manuel de technique opératoire délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com.

Materials:

Stem: Titanium alloy TA6V according ISO 5832-3. Double coating porous titanium + calcium hydroxyapatite. Vacuum packed & double wrapped. Gamma ray sterilized. Loop sutures: Thread Ethylene Polyterephthalate (PET) Ø0.7mm - Needle 40mm.

Matériaux:

Tige : Alliage de titane TA6V selon ISO 5832-3. Double revêtement titane poreux et hydroxyapatite de calcium. Conditionnement sous vide double sachet. Stérilisation rayons gamma. Sutures : Fil Ethylène Polyterephthalate (PET) Ø0.7mm - Aiguille 40mm.



10 Place des Tuilliers, 42720 Briennon, France
2977 Tel : +33. (0)477.60.79.99 – Fax : +33. (0)477.60.79.90

www.evolutisfrance.com

